

Egyes mérés, nő, 19 éves

Mérési értékek 50 kHz-nél

R 662
XC 77
Fázis 6,63°

Mérőműszer: PREMIUM BIA 600
Elvégezte: -

Mérési dátum: 30.01.2017
Név: -
Keresztnév: -
Nem: nő
Mérés-szám: 2

Született: 1997. 08. 08.
Kor: 19 év
Testmagasság: 165 cm
Haskörfogat: 0 cm
Státusz: egészséges

	Számolt értékek	Normál értékek
Testsúly	54,40 kg	
BMI	19,98 kg/m ²	19,00 - 24,00 kg/m ²
Testzsír kg	14,62 kg	8,70 - 12,51 kg
Testzsír %	26,90 %	16,00 - 23,00 %
Testvíz	29,12 Liter	26,11 - 32,64 Liter
Sovány tömeg	39,78 kg	41,89 - 45,70 kg
ECM	17,96	
BCM	21,82 kg	18,50 - 26,66 kg
ECM / BCM Index	0,82	< 1,00
Sejtarány a soványtömegben	54,85 %	> 50,00 %
Táplálkozási index	116,31	100,00 - 140,00
Kapaindex	3,85	2,20 - 3,60
Metaindex	33,13	18,00 - 30,00
Alapanyagcsere	1391,73 kcal	
Aktivitási többlet	278,35 kcal	

A Body Impedancia Analízis (BIA) - általános információk

Magában a testsúly és a BMI nem adnak egy teljes képet a jó egészségről, a fit állapotról és az optimális táplálkozási színtről; ez normál súlyú emberekre is vonatkozik.

Az egészség, teljesítmőképesség és a testi közérzet szempontjából fontosak a testi alkotóelemek - az anyagcsere-aktív sejtrészek (BCM), a testvíz és a testzsír - kiegyensúlyozott arányai.

A bioelektromos impedancia analízis egy egyszerű, nem invazív módszer, hogy meghatározhassuk a testi alkotóelemeket, amivel információhoz jutunk a vízháztartásról és a táplálkozási színtről.

A testösszetételt befolyásolja a veleszületett alkat, a táplálkozás, a folyadékbevitel, a mozgás, a kor és az egészségi állapot.

A BIA kihasználja a csontok, szervek, izmok és a testzsír különböző vezetőképességét. Testi folyadékok a magas elektrolittartalmuk miatt elektromos áramnak kiváló vezetői, miközben csontok és zsírok magas ellenállást nyújtanak. Sejteknek a membránban való lipoproteinréteg által kondenzátoros funkciójuk van és ezzel magas kapacitív ellenállást hoznak létre.

A mérésnél lábon - kézen 2-2 elektródát helyezünk el, az elektródák között egy elektromos váltóáram mező jön létre. 50 KHz-es frekvencián mérünk.

Impedancia

Az impedancia egy elektromos vezető összellenállás a váltóáram ellen, Ohm-ban (Ω). A rezisztencia és a reaktancia részellenállásokból adódik össze.

Rezisztencia

A rezisztencia (R) az elektrolit-tartalmú testvíz tiszta ohm-os ellenállása. A feszültséghez proporcionális és a teljes testvízhez (TBW) fordítva proporcionális.

Mért érték: **662**

Reaktancia

A reaktancia (X_c) egy részellenállás, ami a sejtmembránok kapacitív hatásából levezethető. A reaktancia a sejtmembránok mennyiségéről enged egy állítást, ezzel az anyagcsereaktív testsejttömeg mértéke meghatározásához vezet.

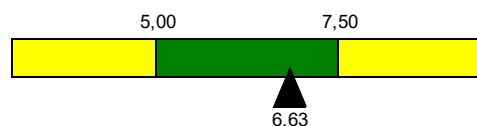
Mért érték: **77**

Fázisszög

Kondenzátorok egy váltóáramkörben időeltolódást okoznak az áram-maximum és a feszültség-maximum között. Mivel a váltóáram szinuszformában jelenik meg, ezt az eltolódást fokban mérik és fázisszögnek (Φ) nevezik. A fázisszög a sejt méretétől, a sejtmembrán áteresztő képességétől és a testfolyadékok az intra- és extracelluláris térben való elosztásától függ.

Normálérték: 5,00° - 7,50°

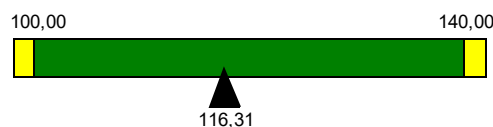
Mért érték: **6,63°**

**Táplálkozási index**

A táplálkozási index (EI) a reaktancia és a rezisztencia közötti arányt fejezi ki és a test táplálkozási helyzetére utal.

Normál érték: 100,00 - 140,00

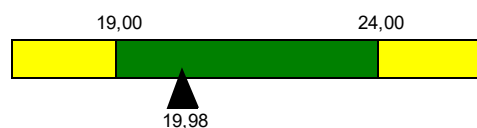
Mért érték: **116,31**

**Body-Mass-Index (BMI) kg/m2**

A BMI a testsúly és a testmagasság arányának megfelelőségéről tesz kijelentést. A test szerkezete és táplálkozási helyzet megállapítása a BMI-vel nem lehetséges. Előrehaladott korban a kívánt BMI-értékek magasabbak. A megkülönböztetésekben a kort is figyelembe kell venni.

Normál érték: 19,00 - 24,00 kg/m2

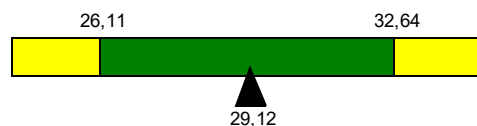
Mért érték: **19,98 kg/m2**

**Testvíztömeg (TBW)**

A rezisztencián keresztül érzékelhető a testvíztömeg. Az emberi test víztartalma 70-75% (újszülötteknél) és 40% alatt (adipóz felnőtteknél) változik és egy normálsúlyú felnőtténél a testsúly 50-65%-a. A TBW-t kétféle testtérben találjuk. A TBW kb. 57%-a az **intracelluláris (ICW)** térben van, kb. 43%-a **extracelluláris (ECW)**. A testvíztömeget mindenekelőtt az izomtömegén keresztül határozható meg.

Normál érték: 26,11 - 32,64 Liter

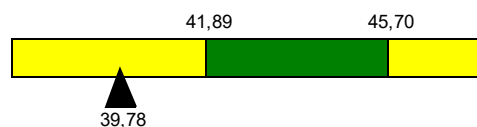
Mért érték: **29,12 Liter**

**Zsírmentes tömeg (FFM)**

A zsírmentes tömeg (= sovány tömeg) túlnyomóan izomzatból, csontból és a belső szervekből áll. Egy egészséges felnőtt embernél egyenlő hidrációs foka van, ami kb. 73%. Egy kóros hidrációs fok eltérő függvényes paraméterek kiszámításához vezethet. Fiziológiai okokból felosztjuk a zsírmentes tömeget testsejttömeg és extracelluláris (sovány) tömegré.

Normál érték: 41,89 - 45,70 kg

Mért érték: **39,78 kg**

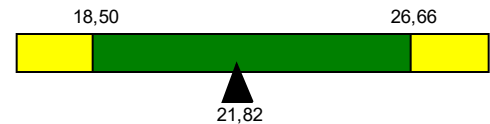


Testsejttömeg (BCM)

A testsejttömeg az oxigénfogyasztó, káliumban gazdag, glukóoxidáló sejtek összessége. Teljesíti a metabolikus munka legnagyobb részét és így meghatározza az alapanyagcserét. A BCM-hez tartoznak a csontvázizomzat, a sima izomzat, a szívizom, a belső szervek, a gasztro-intesztinális rész, a vér, a mirigyek és az idegrendszer sejtjei. A BCM meghatározása elengedhetetlen az étkezési szint meghatározásához és az alultápláltság felismeréséhez. A BCM megőrzése a táplálkozás terápia minden formájában a központi feladat.

Normál érték: 18,50 - 26,66 kg

Mért érték: **21,82 kg**

**Extracelluláris tömeg (ECM)**

Az extracelluláris tömeg a zsírmentes tömeg nem celluláris része. Felosztják extracelluláris folyadékokra (plazma, intersticiális és transzcelluláris folyadékok) és szilárd anyagokra (kötőszövetek és támasztószövetek szála, csontváz). Egészséges embernél az ECM mindig kisebb a BCM-nél, úgyhogy az ECM/BCM-indexnek mindig 1 alatt kellene lennie. Az alultápláltság korai stádiumában a BCM csökkenése és az egyidejű ECM kiterjedése jellemző. Ennek ellenére ilyenkor a testsúly és a soványtömeg változatlan maradhat. Az ECM hirtelen változása mindig víz által keletkezik, ezért van különös jelentősége az intracelluláris és extracelluláris víztér meghatározásának.

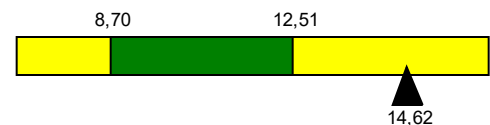
Mért érték: **17,96 kg**

Testzsírtömeg (BF)

A BIA-mérésnél a zsírtömeget közvetve a testsúly és a zsírmentes tömeg különbségéből számolják ki. A testzsír sűrűsége 0,9g/cm³. Egy kg testzsír kb. 7700 kilokalóriát tárol. A testzsírtömeg normál értéke a kortól, nemtől és a sport-aktivitástól függnek.

Normál érték: 8,70 - 12,51 kg

Mért érték: **14,62 kg**

**Metabolikus indexek**

A **Meta-Index** a rezisztencia és a BMI hányadosa és közvetlenül függ az extracelluláris (sovány) tömeg víz- és elektrolit-tartalomtól. Víz- és elektrolit elvesztés esetében emelkedik a Meta-Index.

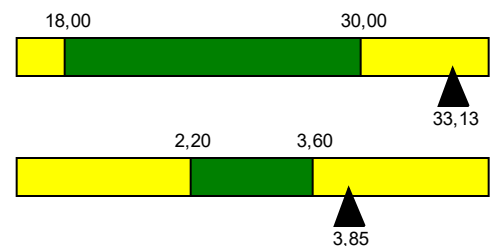
A **Kapa-Index** a reaktancia és a BMI hányadosa és leírja a sejtmembrán mennyiségét egy volumenegységben. A Kapa-Index segít megkülönböztetni BCM-csökkenés esetében egy intracelluláris vízvesztés egy valószínű celluláris anyagvesztéstől.

Normálérték Meta: 18,00 - 30,00

Mért érték Meta: **33,13**

Normálérték Kapa: 2,20 - 3,60

Mért érték Kapa: **3,85**

**ECW/ICW-Index**

A TBW körülbelül 57%-a az **intracelluláris** térben van (**ICW**), kb. 43% **extracelluláris** (**ECW**). Az intracelluláris víztömeget elsősorban az izomtömeg determinálja. Amennyiben ez a két tér kiegyensúlyozott, az **ECW/ICW-Index** 0,6 és 0,8 között van. Olyan katabolikus változások esetében, amelyben a BCM csökken, kompenzatorikus extracelluláris víz raktárolására kerülhet sor, és emelkedik az index.

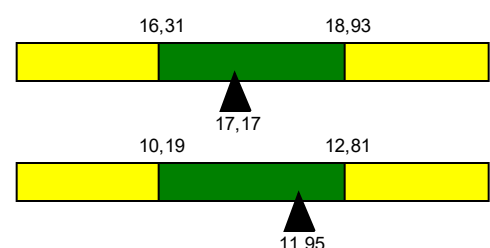
Normálérték ICW: 16,31 kg - 18,93 kg

Mért érték ICW: **17,17 kg**

Normálérték ECW: 10,19 kg - 12,81 kg

Mért érték ECW: **11,95 kg**

ECW/ICW-Index: **0,70**



BIA-VEKTOR

